



WINTECARE®

T~PLUS



UVOD

Na področju terapije je skupni cilj doseganje hitrih rezultatov. Postavlja se vprašanje: kateri dejavniki resnično pospešijo proces zdravljenja? Medtem ko je odgovor zapleten, poenostavljena perspektiva kaže, da lahko pospeševanje zdravljenja zahteva več energije v krajšem času, brez nezaželenih stranskih učinkov.

Predstavljamo T~Plus - napravo, ki izstopa med svojimi primerki z omogočanjem prenosa znatne količine energije v samo nekaj sekundah. Ta edinstvena sposobnost zmanjšuje škodljive učinke toplotnega pregrevanja na površini, hkrati pa optimizira absorpcijo energije v globokih tkivih. Rezultat je skrajšanje časa uporabe. Predvsem se T~Plus odlikuje po tem, da je edina naprava po vsem svetu, ki je bila potrjena strogemu testiranju in spremljanju za ta poseben namen, z rezultati, ki so bili ustrezno objavljeni v uglednih znanstvenih revijah.



Zgornje študije so na spletu brezplačno dostopne.

NEKAJ OPOMB O INSTRUMENTALNI FIZIKALNI TERAPIJI

V današnji medicinski pokrajini cilj presega konvencionalno definicija zdravljenja; obsega izboljšanje splošne kakovosti življenja bolnikov. Ta imperativ ne velja samo za splošno medicino, ampak tudi za specializirana področja, kot sta ortopedija in nevrologija. Medtem ko se farmakologija ukvarja predvsem z obvladovanjem simptomov in operacija postane potrebna, ko so izčrpane druge možnosti, imata obe možnosti davek v smislu tolerance in fizičnega vpliva na bolnika.

Tu se konzervativna fizikalna terapija pojavi kot ključni akter.

Z bolj odmerjenim pristopom pomaga pacientovemu telesu pri okrevanju iz stanja po poteh, ki ne zahtevajo drastičnih ukrepov, kot je odstranitev ali sprememba anatomskega dela (kirurgija) ali sprememba biokemičnega ravnovesja tkiva (farmakologija).

Tecar tehnologija je terapija, ki spodbuja sposobnost telesa za samoregeneracijo. To povzroča manjšo odvisnost in je običajno povezano z manj tveganji



kot drugi uveljavljeni medicinski pristopi.

Fizikalna terapija deluje na principu, da vsak del telesa, vključno z obolela tkiva zahtevajo posebno količino energije, da se preobrazijo . Ne glede na to, ali uporablja elektrokemične, mehanske, toplotne ali elektromagnetne oblike, fizikalna terapija spodbuja reakcije tkiv.

Vrsta, količina in intenzivnost uporabljene energije pomembno vplivajo na izid in trajanje procesa. Naša tehnologija se odlikuje po učinkovitem pospeševanju naravnih telesnih odzivov, prenosu znatne količine energije v tkiva v najkrajšem času in to doseže z uporabo elektromagnetnega polja prek neposrednega stika.

TEHNOLOGIJA TECAR

T.E.C.A.R. pomeni Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo. To je pravzaprav italijanizacija akronima CRET, ki se bolj pogosto uporablja v znanstvenem področju, in sicer: kapacitivni in uporovni prenos energije . *

Naprava CRET torej prenaša energijo v tkivo s stikom z elektromagnetnim poljem z dvema metodama: kapacitivno in uporovno, s ciljem stimulacije nadzorovanih endogenih bioloških odzivov.

Kateri so glavni parametri za ocenjevanje učinkovitosti TECA.R. naprava? Prvi parameter je Frekvenca, kar pomeni, kolikokrat (na sekundo), ko se polarnost elektromagnetnega polja, ki deluje na telo, obrne. Po navedbah znanstvene literature je frekvenca, ki jo uporablja TECA.R. naprava mora biti približno 0,5 megaherca. Na podlagi električnih značilnosti različnih vrst tkiv v telesu ta frekvenca omogoča izkoriščanje tako magnetnih kot električnih učinkov uporabljenega polja , kar omogoča dostop do večjega števila odzivov tkiv in posledično širši terapevtski spekter od drugih vrst pripomočkov za fizikalno terapijo.

Še en parameter za merjenje učinkovitosti TECA.R. naprava je jakost (količina) toka, ki se lahko prenese ali ustvari v tkivih. Ta parameter je povezan s toplotnimi in netoplotnimi učinki naprave. Visoke ravni toka povzročajo klinično pomembna povišanja temperature, medtem ko zmerne ravni toka spodbujajo obnovo tkiva brez povečanja temperature tkiva preko fiziološkega praga.

Dva druga elementa, ki sta uporabna pri ocenjevanju terapevtskih učinkov na podlagi mase zdravljenega tkiva, sta: Energija, ki se lahko izrazi v Joulih, in Moč, ki se lahko izrazi v vatih, kar pomeni količino energije, prenesene v tkivo za vsako sekundo zdravljenja (npr. 10 vatov/s x 10 = 100 joulov).

* Več kot šestdeset člankov, objavljenih v pregledih faktorjev vpliva o CRET



Za učinkovit prenos energije so potrebne visokozmogljive naprave za večja področja tkiva, ki zahtevajo seje v razponu od nekaj tisoč do več kot sto tisoč joulov, odvisno od tretiranega tkiva in terapevtskega cilja.

Kako poteka prenos energije?

Elektromagnetno polje medsebojno vpliva na vsebnost elektrolitov v telesnih tkivih, kar ustvarja toplotne učinke in druge odzive tkiv, ki so koristni za različna klinična stanja. Telo se pod elektromagnetnim poljem obnaša kot kompleksen polprevodnik, ki kaže povečanje toplote zaradi toka



Poleg tega lahko električni in magnetni učinek povzročita tudi netoplotni učinek, kot je dokumentirano v študijah, objavljenih v znanstvenih revijah.

Na primer, polje 0,5 MHz spodbuja proliferacijo mezenhimskih matičnih celic in povečuje vitalnost levkocitov. Hkrati ima citostatični učinek, kar pomeni, da zavira rast škodljivih celic in krvnega tkiva.

Glede na prej omenjene soobstoječe vzroke so učinki, opaženi pri

Znanstveno literaturo o uporabi elektromagnetnega polja frekvence 0,5 MHz na človeško telo je mogoče povzeti na naslednji način:

1. Povečanje lokalne prekrvavitve
2. Vazodilatacija
3. Povišanje temperature
4. Odvajanje odvečne tekočine
5. Razmnoževanje celic

Odvisno od absorbirane moči, prenesenega toka in količine tretiranega tkiva lahko terapevt določi, kateri od teh učinkov bo prevladoval v zdravljenem tkivu.

Kako lahko preverimo, »kje« se pojavijo ti učinki?

To je odvisno od vrste uporabljene elektrode: v uporovnem načinu se joulov učinek pojavi predvsem v bližini tkiv z večjim električnim uporom, kot so kosti, vezi in kite; v kapacitivnem načinu se učinek pojavi predvsem v bližini elektrode in še izraziteje na območjih z visoko prevodnostjo, kot je mišično tkivo.

RESISTIVE IN CAPACITIVNI NAČIN


Po definiciji T.E.C.A.R. tehnologija mora imeti dva načina delovanja, ki ji omogočata različno delovanje na različnih delih telesa in njihovih tkivih.

V rezistivnem načinu lahko terapevt:

- hitro povišati temperaturo "trdih tkiv", kot so kosti in sklepi;
- povečati perfuzijo krvi s povečano nasičenostjo s kisikom;
- spodbujajo vazodilatacijo;
- spodbujanje funkcionalnega obnavljanja tkiva s proliferativnim učinkom elektromagnetnega polja frekvence 0,5 MHz.

V kapacitivnem načinu bo lahko:

- hitro povišajte temperaturo "so tkiva", kot so mišice, fascija, dermis in maščoba;
- spodbujanje odvajanja odvečne tekočine;
- spodbujajo vensko vazodilatacijo z zmanjšanjem tonusa sosednjih tkiva.

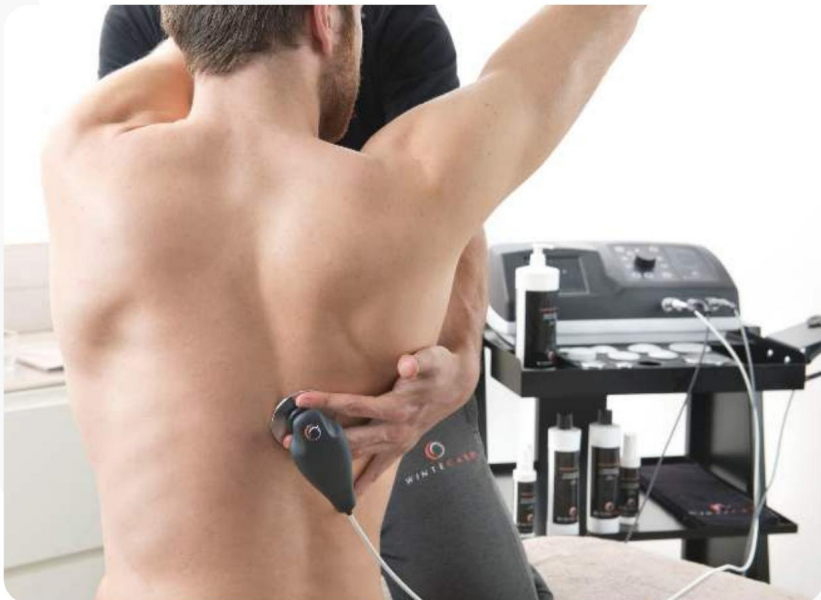

NAČIN BREZ KREME

Eden od potencialov tehnologije tecar je možnost njenega kombiniranja z manualno terapijo, da bi pomnožili terapevtske učinke.

Običajno cret naprava zahteva nanos prevodne kreme na človeško telo. Namen kreme je čim bolj zmanjšati električni upor kože, ki je sicer zelo odporna na tok. Čeprav krema rešuje to težavo, kožo naredi spolzko in jo je težko manipulirati, ko so potrebni zapleteni strukturni manevri ali ko je treba zdraviti miofascialno tkivo.

T~Plus je edina TECA.R. naprava na svetu, ki daje operaterju možnost prenosa velike količine energije v tkiva tudi brez uporabe prevodne kreme.

Ta edinstvena funkcija daje operaterju, ki uporablja T~Plus, veliko širši obseg delovanja v vseh primerih, kjer so potrebne miofascialne tehnike ali ko je treba uporabiti natančne osteopatske manevre v kombinaciji z napravo.

Brez kreme pomeni tudi več moči, ne da bi morali nenehno premikati elektrodo . Temperaturni dvig poteka postopoma, brez nadležnih vrhov, zaradi česar je zdravljenje prijetno za pacienta in manj utrujajoče za operaterja.



UGODNOSTI MED REHABILITACIJO

MANJ ČASA, BOLJŠI KLINIČNI REZULTATI

Glavni izziv pri terapiji je pospešiti čas celjenja, ki ga zapletajo medsebojno povezani dejavniki, ki vplivajo na regeneracijo telesa. Kisik, prehrana, drenaža in regeneracija so ključni pri celjenju tkiv, odvisno od

močno vpliva na učinkovitost krvnega obtoka. T~Plus je optimalna naprava za zdravstvene delavce, ki zagotavlja nadzor nad temi dejavniki in spodbuja endogeno celjenje v celotnem procesu rehabilitacije – od zgodnjega vnetja do popolne funkcionalne okrevanja. Nobena druga naprava za fizikalno terapijo ni konkurenčna T~Plusu v zagotavljanju globine učinka, širokega odziva tkiva, natančnosti upravljanja z energijo in vsestranskega zdravljenja. Izkazalo se je za koristnega pri različnih stanjih, pred in po operaciji, vključno s tendinozo, raztrganinami mišic in zmrznjeno ramo, kar omogoča vrhunske rezultate v krajšem času.

Pred in po operaciji, tendinoza, peritonitis, raztrganine mišic, zvini, vaskularna insuficience, kontuzije, poškodbe lokomotornega sistema, lumbago, cervikalgija, brahialgija, omejen obseg gibanja, zmrznjena rama, miofascialni bolečinski sindrom, artroza, hondropatija in poškodba vezivnega tkiva so vsa področja, na katerih lahko T~Plus pomaga zdravstvenemu delavcu doseči boljše rezultate v krajšem času.



PREDNOSTI UČINKOVITOSTI

IZBOLJŠA OBNOVO, POVEČANA OBREMENITEV TRENINGA

Usposabljanje, opredeljeno kot niz dejavnosti, ki so bistvenega pomena za doseganje cilja, po naravi vpliva na rezultate tako takojšnjega prizadevanja kot kasnejših pripravljalnih dejanj za uspešnost. Posledice intenzivnega treninga se čutijo naslednji dan in zahtevajo pozornost, še preden požanje koristi. Po drugi strani pa za tiste, ki se odločijo, da ne bodo trenirali, ustrezen počitek postane bistvenega pomena, da telesu zagotovi optimalno okrevanje.



DOMOVI, POČITEK, BIOMEHANIKA, OBMOČJE GIBANJA, STRES... vse vpliva na kvaliteto treninga in posledično na ZMOGLJIVOST. Amaterski športniki, profesionalci, zaposleni, vodje ...

Okrevanje mišic, kakovost spanja, obvladovanje stresa, biomehanska podpora in kakovost tkiva so področja zdravljenja, kjer lahko moč T~Plus naredi veliko razliko.

Že leta WINTECARE skrbno ustvarja programe zdravljenja ki so se izkazali na terenu v profesionalnem športu in upravljajo na tisoče zdravljenj letno.

UČINKI NA TELO

ZMANJŠANJE BOLEČINE

REGENERACIJA TKIVA

POVEČANA PREKRVLJENOST

POVEČANA LOKALNA SATURACIJA S KISIKOM

IZBOLJŠANA VISKOELASTIČNOST TKIVA

ZMANJŠANJE EDEMOV

SPREMLJANJE VNETNIH PROCESOV

GLOBINA ZNANSTVENA DOKAZANA

IZJEMNO PRIJETNA OBRAVNAVA

FIZIOLOGIJA IN ZDRAVLJENJE

Kot rečeno, T~Plus prenaša energijo v tkiva skozi elektromagnetno polje pri 0,5 MHz. Energija se glede na količino prenesene energije pretvori v zdravilni, cirkulatorni ali toplotni učinek, vsak od učinkov pa je uporaben v določenih kliničnih stanjih. Kadarkoli se v mišično-skeletnem sistemu pojavi bolečina ali vnetje, T~Plus naredi razliko.

Oglejmo si nekaj primerov:

običajno mislimo, da je invnetje škodljivo; v resnici je vnetje koristen, potreben in zaželen proces za obnovo telesa pred kakršno koli poškodbo. Bistvo je, da lahko ta proces obvladujemo tako, da omejimo njegove morebitne stranske učinke in tako preprečimo, da bi postal kroničen.

Kot vemo, je tipična vnetna reakcija sestavljena iz štirih komponent:

- induktorji sprožijo vnetni odziv;
- senzorji jih zaznajo;
- pri vnetnih mediatorjih inducirajo senzorji;
- eektorji, kar pomeni ciljna tkiva vnetnih mediatorjev.

Ne glede na področje udarca bi se telo na dogodek odzvalo z tipična akutna vnetna reakcija: bolečina, rdečina, vročina, oteklina in omejitev gibanja.



Induktorji (vzrok poškodbe) aktivirajo specializirane senzorje, ki sprožijo v vnetnem procesu.

Ti senzorji sprožijo proizvodnjo posebnih skupin vnetnih mediatorjev, razvrščenih glede na biokemične lastnosti in različne izvore.

Nekateri so shranjeni v imunskih celicah, drugi krožijo kot neaktivni prekurzorji, nekateri pa nastanejo kot odgovor na stimulacijo. Ta mikroskopska koordinacija, omogočena z elektrokemičnimi sredstvi, odraža zapleteno komunikacijo med specializiranimi operaterji, ki se ukvarjajo s postopki popravljanja.

Vnetni mediatorji izrazito vplivajo na funkcionalna stanja.

Odziv na vnetne mediatorje je zelo razširjen po tkivih, kar povzroča vazodilatacijo, ekstrasvazacijo levkocitov in uhajanje plazme. Medtem ko se učinki razlikujejo glede na različne vrste tkiv in celic, vnetni mediatorji zlasti vplivajo na lokalne krvne žile in igrajo ključno vlogo pri vzdrževanju homeostaze tkiva, vplivajo na nevroendokrine in presnovne funkcije.

Kot odziv na poškodbo človeško telo uporablja natančno notranjo komunikacijo, da mobilizira »specializirane operaterje« in potrebne materiale za popravila v bližini poškodovanega tkiva. Ta proces ustvarja učinke, kot so vazodilatacija, temperaturne spremembe in spremenjena prepustnost tkiva. Ko bela krvna celica izhaja iz kapilare, se ti operaterji obnašajo kot usposobljeni delavci, ki uporabljajo signale, kot so kemotaksija in prostaglandini, da dosežejo, prečkajo ovire in zavzamejo svoj delovni položaj.

Ta orkestrirana komunikacija prispeva k doseganju cilja popravila.

Zgornji primeri ponazarjajo, da sta učinkovitost in uspešnost popravila odvisna od dobro delujočega odziva krvnega obtoka. Prevoz telesa



mreža je poravnana z cirkulacijskim sistemom, razdeljen na venski, arterijski in limfni sistem. Dejavniki, kot so cirkulacija, hitra preusmeritev, dostopne točke in organiziran odtočni sistem, ne morejo pomembno vplivati na popravila.

Kakšni ukrepi lahko


pozitivno vplivati na te procese in pospešiti popravilo telesa?

Ta inovativna naprava T-Plus tecar je spretna pri ustvarjanju ve ključnih odzivov tkiva in krvnega obtoka:

osnova



post

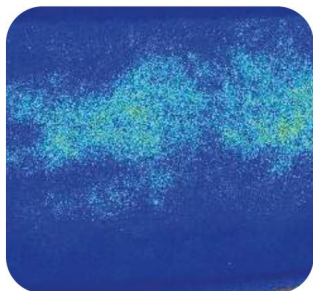

Povečanje krvne perfuzije se lahko uporabi za povečanje oskrbe s kisikom in hranili v krvi. Če gorivo in materiali za popravilo lažje dosežejo mesto poškodbe, ima popravilo velike koristi.

Drenažo lahko uporabimo za odstranjevanje neželenih odpadkov in kopičenja v tkivu, kar je še posebej uporabno v primerih edema.

Spodbujena vazodilatacija v specifičnih osnovnih območjih vazodilatacije lahko pomaga pri pospešenem odstranjevanju vnetnih katabolitov in drugih odpadnih materialov. Razširitev iztočnih poti od mesta poškodbe do centrov za odstranjevanje olajšuje hitro odstranjevanje ostankov in nepotrebnih elementov, s čimer se poveča učinkovitost


celoten proces.

Zvišana temperatura zmanjša moč tkiva, poveča prožnost tkiva in poveča presnovno aktivnost. Kadar stopnja postopka popravila vključuje odstranitev poškodovanega tkiva ali izboljšanje mehanskih vidikov na drugih delih, se toplotna energija izkaže kot odličen zaveznik.


osnova




post

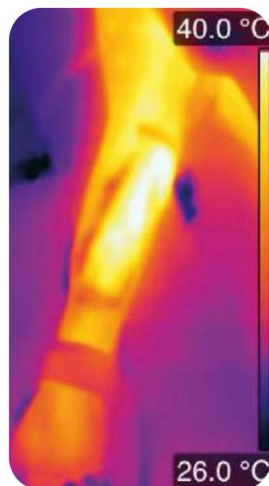

Navsezadnje spodbujanje celične proliferacije izboljša kakovost procesa popravljanja funkcionalnega tkiva, ki vključuje celice s posebnimi nalogami v danem organu. Izjemen vidik telesa je njegova sposobnost, da se večina tkiv regenerira pod ugodnimi pogoji. Dražljaj, ki poveča ta pojav, znatno pospeši celotno dokončanje popravila.

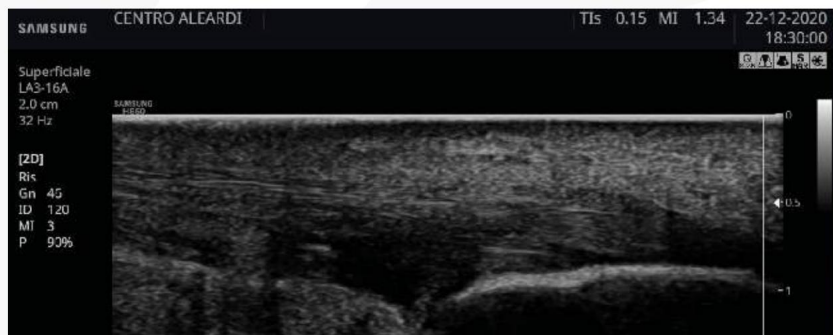

Kronična tendinopatija z degeneracijo Ahilove tetive.

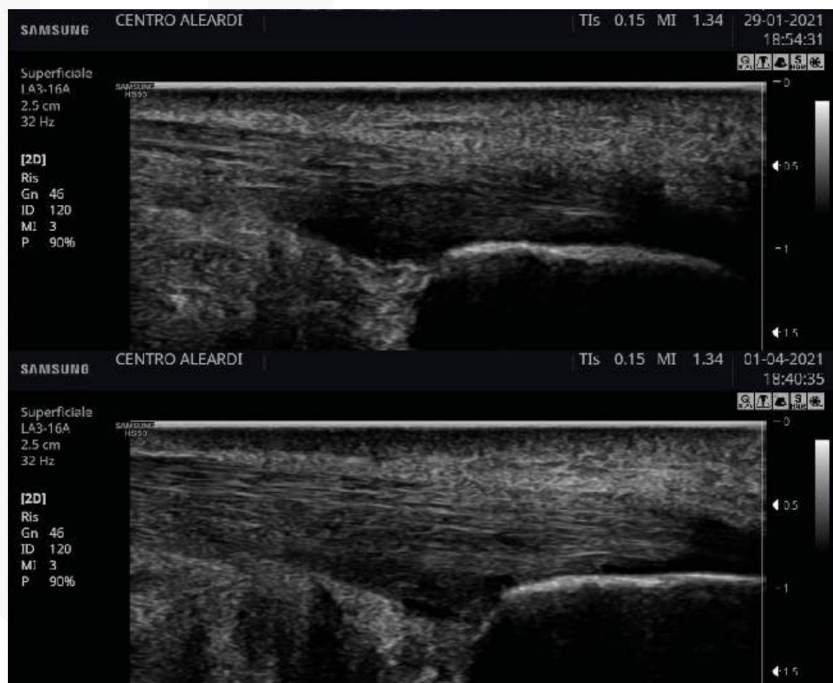

Tendon aer 6 seans in 12 tednov. Bolečine so izginile in polna funkcionalnost.

PODROČJA UPORABE

CERTIFICIRAN KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK ZA ZDRAVLJENJE:

- Degenerativne artropatije: npr. artroze, artritis in razni hondropatije
- Disfunkcije in sindromi hrbtenice: lumbago, bolečine v hrbtu in materničnega vratu z ali brez radikulopatije
- Mišično-skeletne bolezni, značilne za športnike
- Mišično-skeletna obolenja pri tradicionalnem bolniku: npr. poškodbe in nesreče z bolečino in vnetjem
- Bolečine v sklepih in mišično-skeletnem sistemu
- Bolečina in rehabilitacija pri bolnikih z nevrološkimi motnjami: npr. fantomski ud; hemiplegija
- Pozitivni učinki na biomehaniko pri športnikih in DOMS
- Zlomi kosti
- Otrdelost penisa
- Rehabilitacija po boleznih in disfunkcijah, povezanih z vaskularno insuficienco, pri kateri lokalizirani dražljaj krvnega obtoka koristi prizadetim tkivom (npr. sladkorna bolezen, rane, limfedem);
- Pooperativna rehabilitacija
- Tendinopatije: npr. tenosinovitis, peritonitis in tendinoza

NEMEDICINSKE APLIKACIJE:

- Okrevanje mišic
- Biomehanska optimizacija
- Celulit
- Gube
- Lokalizirana maščoba
- Stres



VEČ ORODIJ V ENEM

UPORNA NAČIN

Hitro lahko spodbudi povečanje lokalizirane perfuzije krvi, poveča temperaturo trdih tkiv in podpira procese popravljanja telesa.

KAPACITIVNO NAČIN

Koristno je drenažo, zvišanje temperature so tkiva in spreminjanje viskoelastičnosti s ciljnim povečanjem toplote.

HIPERTERMIČNO ELEKTRODE

Uporabni so za pospešitev toplotnega odziva tkiva.

HIPOTERMIČNO ELEKTRODE

Zasnovani so posebej za odložitev povečanja toplote, kar je idealno v primeru hudega vnetja in edema.

DIATERMIJSKO FIBROLIZA

Način zdravljenja, povezan z elektrodami, zasnovanimi za združevanje učinkov diakutane brolice s toplotnim povečanjem.

STATIČNO NAČIN

Zasnovan tako, da operaterju omogoča spremljanje pacientove vadbe med aplikacijo terapije, pri tem pa ohranja roke proste od ročnika in elektrode. Idealno za obnovitev gibljivosti sklepov.

DOZIMetriJA NAČIN

Omogoča boljše spremljanje odmerkov prenesene energije in se tako izogne neželenim povečanjem toplote v bližini poškodovanih ali poškodovanih tkiv.

PROGRAMI

DOSTOPNI PREK T~PLUS

Za kakovostno spanje

Ciljno povečanje toplote in stimulacija periferne cirkulacije na strateških točkah telesa za uživanje v regeneracijskem spanju.




V primeru bolečine

Na mehanoreceptorje in kemoreceptorje, ki so odgovorni za bolečino, je mogoče vplivati z dražljaji, ki preprečujejo njihovo aktivacijo, kot so temperaturne razlike in spremembe v perfuziji periferne krvi.

Za okrevanje

Nadzorovano povečanje perfuzije krvi olajša odstranjevanje presnovnih odpadkov, ki nastanejo med fizičnim naporom.

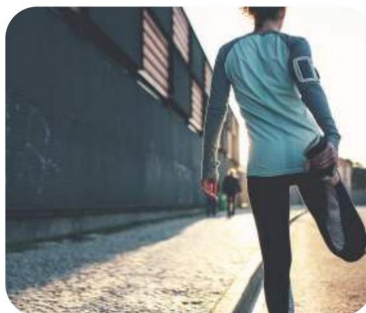

V primeru vnetja

Povečano mikrocirkulacijo, oksigenacijo in proliferativne dražljaje je mogoče strateško združiti za pospešitev naravnega razrešitev vnetnega procesa.



V primeru stresa

Ravni hormonov so občutljive na spremembe telesne temperature in so tesno povezane s perifernim cirkulacijskim sistemom. Obvladovati jih pomeni znati ukrepati na stres.

Za biomehaniko

Ciljna hipertermija omogoča korekcijo nekaterih sklepnih motenj in delovanje na mišični tonus za maksimiranje podpornih vzvodov.






Za večjo osredotočenost

Nadzorovani mikrocirkulacijski dražljaji pri nizki energijski intenzivnosti pozitivno vplivajo na sposobnost osredotočanja.

Za sprostitvev

Na sprostitvev mišic, lokalno zdravljenje gub in kopičenje tekočine vplivajo lokalizirani cirkulacijski dražljaji.

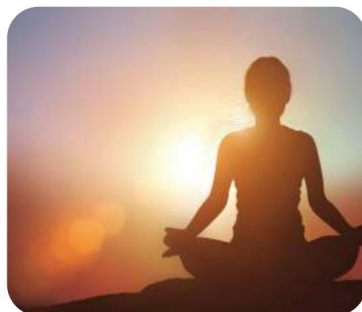

V primeru celulita

Prekinitev cirkulatornega zastoja in limfna drenaža sta nujna koraka za zagotovitev vidnih in dolgotrajnih rezultatov.

ZNAČILNOSTI

MOČ

T~Plus je naprava za fizikalno terapijo, ki bolj kot katera koli druga omogoča prenos velikih količin energije, hkrati pa zmanjšuje neželeno pregrevanje površinskih tkiv in omogoča natančno modulacijo količin glede na terapevtski cilj.

UČINKOVITOST

Številne študije, ki so že bile objavljene v odmevnih znanstvenih revijah, skupaj s številnimi drugimi, ki so v postopku objave, poudarjajo učinek naprave in njeno prilagodljivost pri uravnavanju ravni energije in hitrosti reakcije.

PATENTIRANA INOVACIJA

Naprava vsako sekundo izmeri dejansko količino energije, prenesene v tkivo, in zagotavlja natančnost energijskega odmerka za specifično zdravljenje.



ZNANSTVENA RAZISKAVA

Wintecare sodeluje z UIC (Espanja) in SUPSI (Švica) v Evropi, ki vsako leto razvijeta študije, objavljene v revijah z močnim faktorjem vpliva, z uporabo njegove opreme.

PROGRAMI USPOSABLJANJA

Ekipa Wintecare je zastavljena tako, da razvija programe usposabljanja, prilagojene potrebam in interesom naročnika, osnovno usposabljanje o uporabi naprave pa je vedno vključeno v nakup. Tečaji so lahko na voljo tako osebno kot na spletu.

PATENTIRANA TEHNOLOGIJA

Inovativna metoda generiranja radijskih frekvenc, povezanih z načinom dostave energije, je bila vodena kot mednarodni patent.

KLJUČNE KOMPONENTE

- 1 Hypergibljiva plošča
- 1 kapacitivni način
- 1 uporovni način
- 4 uporovne elektrode
- 2 kapacitivni hipotermični elektrodi
- 5 kapacitivnih hipertermičnih elektrod
- Radijski nadzor
- Napajalni kabel
- Zaščitna vrečka za elektrode

POSEBNI DODATKI

- Izboljšana hipotermična elektroda
- Velika moč brez povečanja toplote
- Uporovne elektrode brez kreme
- Kombinacija visokih stopenj toka za največji oprijem kože


Kabli za način fiksne plošče

- Vrhunska natančnost pri odmerku uporabljene energije

Diatermični brolyzers

- 1 kapacitivni način
- 1 uporovni način

Da kar najbolj izkoristite prednosti brolyze z manj bolečin

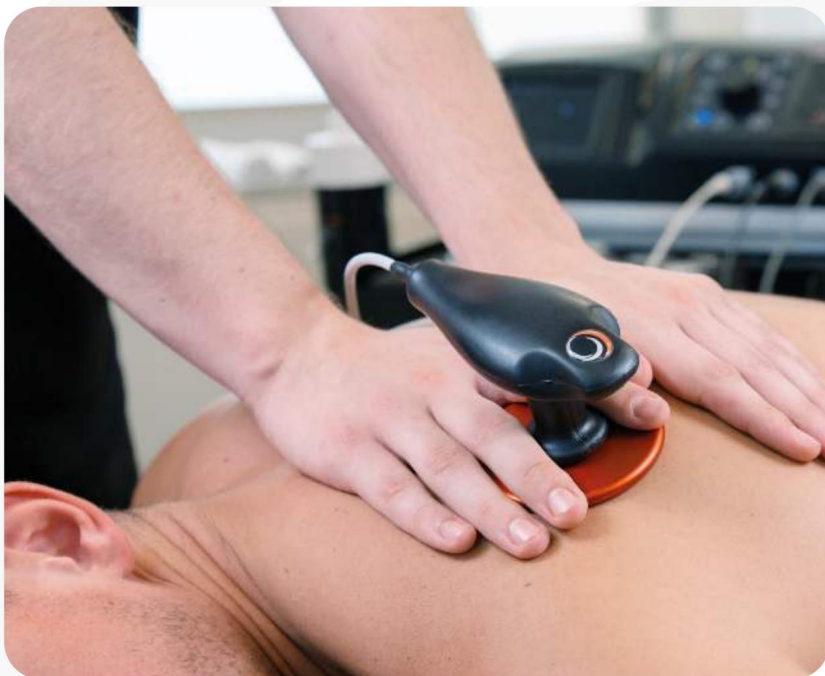

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

- Medicinski pripomoček s certifikatom CE Medical Razred II B in FDA
- Frekvenca: 0,447 MHz $\pm$ 5%
- Moč: CAP: 450 VA / RES: 300 W
- Teža: 6,8 kg / 15 lbs
- Dimenzije: 50cm x 27cm x 19cm / 19,75" x 10,75" x 7,5"
- Največji tok: 2 A



WINTECARE NA +41

(0)91 22 55 229

Via Motta 1o | 6830 Chiasso
Svica

www.wintecare.ch
info@wintecare.ch

